vigo
ottobock.care

Contactez nous

Prenez rendez-vous dans l'une des agences VIGO les plus proches de chez vous. Nos prestataires orthopédiques sont heureux de vous accueillir.
Découvrez toutes les agences sur **www.vigogroup.eu**

Nous travaillons toujours sur rendez-vous afin de disposer de suffisamment de temps.
Prenez rendez-vous via **info@vigogroup.eu**

Notre offre

- Prothèses
- Orthèses
- Fauteuils roulants et aides à la mobilité
- Chaussures orthopédiques
- Semelles



Nos parcours de soins uniques

- Orthopédie pédiatrique
- Soins aux personnes âgées
- Réhabilitation
- Brûlures
- Paralysie cérébrale
- Pieds diabétiques

info@vigogroup.eu | www.vigogroup.eu |

vigo
ottobock.care

Mode d'emploi du matériel de
Traitement des 'brûlures'




Silicone


Entretien :

- pour le nettoyage:
  - Lavage quotidien
  - Utilisez un savon neutre. Rinccez bien le savon.
- pour désinfecter : faire bouillir pendant 2 min.
- général:
  - 23/24h, pas sous la douche
  - Lorsque vous ne l'utilisez pas, collez le silicone sur un sac en plastique.
  - Coupez les coins pour les arrondir
  - Utilisez 1 feuille de silicone pendant 7 à 8 semaines au moins



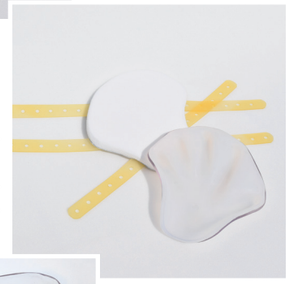

Ceci est une attelle dite "sandwich". La partie en silicone doit être désinfectée dans de l'eau bouillante.

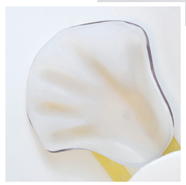

Prenez rendez-vous avec le bandagiste lorsque le silicone est presque usé.

Vêtements de compression

Entretien :

- Machine à laver ou lavage à la main:
  - Programme délicat laine/soie/...
  - 30°, max 40° avec un détergent liquide pour la laine ou la soie
  - Peut être lavé quotidiennement
- Il est préférable de laisser sécher à l'ombre sur un séchoir à linge (sans pinces à linge)
- Ne coupez jamais dans les vêtements



Lorsque les fibres du vêtement ont perdu leur élasticité et que le vêtement ne donne plus une pression suffisante ou que les coutures sont usées, prenez rendez-vous avec le bandagiste. De même si votre enfant a grandi ou que votre poids a changé.



Mettez-le à l'aide du sac vert d'enfilage (fourni avec le premier compressif):

1. Enfilez le sac sur la jambe (ou le bras)
2. Mettez les vêtements compressifs à bonne hauteur
3. Sortez le sac par-dessous les vêtements : la boucle orange du sac d'enfilage peut être accrochée à une clinche de porte ou un cro chet, afin de faciliter le retrait

Orthèses

Entretien :

- Pour le nettoyage des éventuelles parties en tissu:
  - Lavez les à froid à la main ou dans la machine à laver. Pour cette dernière option, il faut fermer les velcros, afin de prévenir des dégâts sur d'autres vêtements.
- SILICONE:
  - Pour le nettoyage et la désinfection de la partie en silicone de l'orthèse : laver à l'eau et au savon, rincer puis faire bouillir à l'eau pure pendant 2 min.
- UVEX:
  - Les pièces en plastique dur peuvent être lavées à l'eau et au savon doux.
  - Pour éviter toute déformation, ne jamais laisser l'UVEX chauffer au-dessus de 50°.
- MASQUE:
  - Portez-le 23/24h
  - Ouvrez le masque au moyen du "système de clic" et laissez les velcros fermés. Vous avez donc toujours la même pression
- ATTELLE SANDWICH:
  - Portez-le pendant la nuit et au repos
- MINERVE:
  - Portez-la 23/24h



Prenez rendez-vous avec le bandagiste si l'orthèse est usée ou ne convient plus.

En général

- Laissez la crème hydratante s'imprégner et massez suffisamment, essuyez l'excès si nécessaire avant de mettre une orthèse ou un vêtement compressif.
- Augmentez la durée pendant laquelle vous portez la silicone progressivement jusqu'à ce que le nombre d'heures demandé soit atteint (les compressifs peuvent être portés en continu dès le pre mier jour).
  Exemple : le premier jour : 2 heures
  le deuxième jour: 4 heures
  et après 2 semaines 23/24 heures
- Attention!
  Les règles figurant dans ce dépliant sont des lignes directrices. Si le médecin dit autre chose, veuillez donner la priorité à l'avis du médecin !
- Si vous rencontrez des problèmes, veuillez prendre rendez-vous avec votre bandagiste via www.vigogroup.eu/contact.

Fréquemment, des vêtements de compression et/ou des silicones sont prescrits pour le traitement des brûlures et des cicatrices. Nous donnons ci-après quelques **règles de base** concernant **l'utilisation et l'entretien** des produits concernés.

